




石炭・コークス 中 イオウ分析装置 (分析時間 120秒)

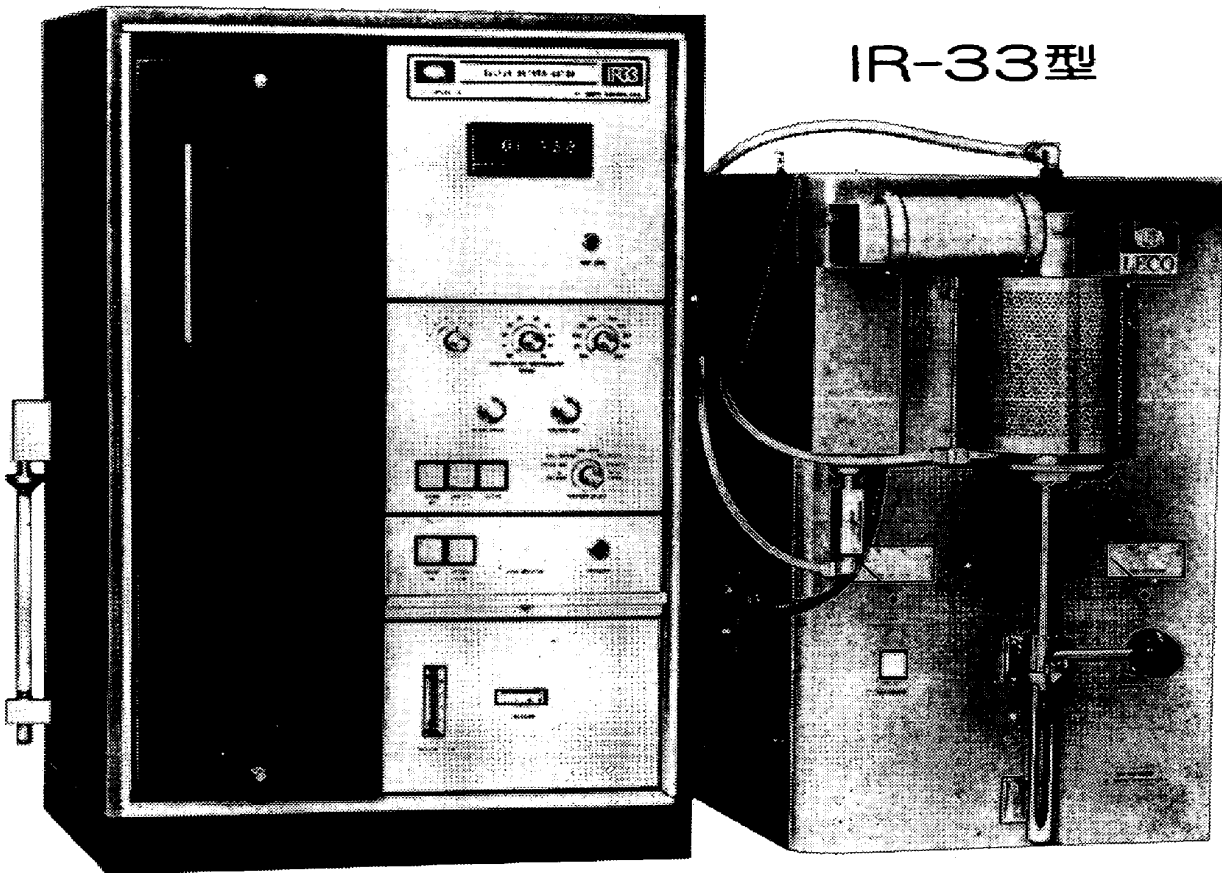

全 自 動 誰にでもすぐ分析出来ます

精 度 S含有量の±3%

分析範囲 0.01~3.00%(0.5g)

分析時間 2分

自動重量補正範囲 0.2g~0.7g

LECO IR-33は石炭・コークス中の硫黄分析を正確かつ迅速に行うため高周波燃焼法を採用しています。

酸素気流中で高周波燃焼した試料から発生するSO₂は赤外吸収セルで検知されます。

すべての硫黄化合物は高温燃焼で完全に分解され、高周波炉と検知器の間の加熱配管により高いSO₂の回収率を得ております。

分析結果はSのパーセント値で光電式数字で表示されます。

オプションとしてプリンターやコンピューター接続用のBCD・OUTPUTもつけられます。

日本総代理店



日本アナリスト株式会社

本 社 〒141 東京都品川区西五反田3-8-8(町原ビル) TEL(03)493-7281(代)
大阪営業所 〒560 大阪府豊中市北桜塚 3-7-15 TEL(06)849-7466
九州出張所 〒805 北九州市八幡東区中央2-24-3日商岩井KK内 TEL(093)661-5301

昭和五十年七月二十五日
印刷納本
(毎月一回発行)

編集兼発行人
東京都千代田区大手町一丁目九十四番地
印刷
倉田 沢畑 直太 郎

振替
東京三井銀行
口座
東京二六〇二九三番

(分
会
員
無
料)